

Modèle	Go-Go® Endurance Li
Code de commande	S54LXLIT
Capacité maximale	147.4 kg (325 lb)
Vitesse maximale ¹	Jusqu'à 6.76 km/h
Garde au sol ³	1.5" au moteur
Rayon de giration ³	48.25"
Longueur hors-tout ³	42"
Largeur hors-tout ³	20.5"
Hauteur siège-sol ³	16.25" - 17.75"
Hauteur siège-plancher ³	21.25" - 22.75"
Roue(s) avant ³	2" x 8" solide
Roues arrière ³	2.5" x 8" solide
Suspension	Avant et arrière (Suspension CTS)
Autonomie par charge ^{1,2}	8Ah** : Jusqu'à 10.6 km à 91 kg (200 lb) ; 8 km à 147.5 kg (325 lb) 16Ah MAXX ⁴ : Jusqu'à 21.3 km à 91 kg (200 lb) ; 16 km à 147.5 kg (325 lb)
Poids total sans les batteries ³	42.4 kg (93.5 lb) (le siège est inclus dans le poids)
Pièces la plus lourde une fois l'appareil démonté ³	34 kg (40.75 lb) (section avant)
Siège standard ³	Type: Compact, rabattable Matériau : Vinyle noir Dimensions: 17" x 17"; 20" x 18" Poids : 10.4 kg (23 lb) (17" x 17"); 12.6 kg (27.75 lb) (20" x 18")
Motorisation	Moteur 24V CC, boîte-pont scellée
Freins	Regénératif et électromécanique
Batteries requise ³	Capacité : 8 Ah lithium ion** ou 16 Ah (MAXX) lithium ion ⁴ Poids : 8 lb (8 Ah); 12 lb (16 Ah MAXX)
Chargeur de batteries	Externe, 3.5 A (lithium-ion)
Garantie	Châssis : À vie, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Électronique: 2 ans, limitée Batteries: 2 ans, limitée

- 1 Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la capacité en ampère-heure (Ah) des batteries et la condition des batteries et des pneus. Ces spécifications prudent varier de ±10%.
- 2 Les résultats sont basés sur des calculs théoriques selon les spécifications des batteries au lithium ainsi que la performance de la motorisation de l'appareil. Tests effectués à la capacité maximale de poids.
- 3 En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, cette spécification peut être sujette à des variations de ±3%.
- 4 Ne répond pas aux exigences des compagnies aériennes.

PRIDE
MOBILITY
VIVEZ VOTRE MEILLEUR®

Beamsville, ON • 888-570-1113
pridemobility.ca |    



** Le transport de cet appareil sur des avions commerciaux est soumis aux réglementations fédérales et à la politique des compagnies aériennes. Veuillez consulter votre compagnie aérienne avant votre vol pour vous assurer que votre Go-Go® Endurance Li et sa batterie lithium-ion sont autorisés.

NOTE: Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication; nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de la charge de la batterie, de l'état de la batterie et de la pression des pneus. En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, la longueur, la largeur, le rayon de braquage et la garde au sol peuvent être sujets à des écarts de ±3%. Les sièges sur commande spéciale ou de dimensions non standards ne sont pas rabattables à plat et réglables en profondeur.

CAFR_GOGOENDURANCELI_082321

GOGO
ENDURANCE Li

**DÉCOUVREZ
LA PUISSANCE
PORTABLE DU
LITHIUM-ION**



VIVEZ VOTRE MEILLEUR®

pridemobility.ca |    

LE LITHIUM-ION RENCONTRE LA PORTABILITÉ



**DURÉE DE VIE
PLUS LONGUE**

BATTERIE AU LITHIUM-ION

- Temps de charge plus rapide
- Plus d'énergie utilisable
- Performance soutenue
- Durée de vie plus longue
- Poids plus léger
- Protection intelligente de la batterie

Siège compact à dossier rabattable et appui-bras

Démontage facile d'une seule main



Guidon delta avec port de charge

Phare avant DEL à haute intensité

Panneaux de carrosserie de couleur interchangeables pour l'avant et l'arrière


Suspension CTS comprend des amortisseurs réglables pour plus de confort



Guidon delta avec port de charge



Démontage facile d'une seule main

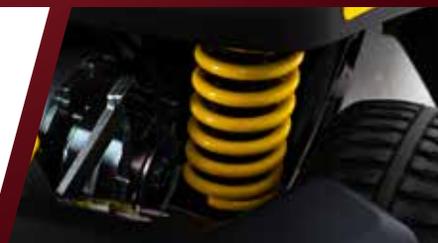

Suspension avant et arrière Comfort-Trac pour plus de confort

Avec le Go-Go® Endurance Li, voyager n'a jamais été aussi simple ! Ce scooter à 4 roues a tout ce dont vous avez besoin pour un voyage sûr et pratique. Avec la batterie lithium-ion standard 8AH conforme aux exigences des compagnies aériennes**, le Go-Go Endurance est parfait pour les voyages en avion. Le démontage facile d'une seule main vous offre la portabilité dont vous avez besoin. Lorsque vous arrivez à votre destination, profitez d'une conduite douce et confortable avec la suspension Comfort-Trac.

Caractéristiques supplémentaires

- Autonomie maximale par charge jusqu'à 21.3 km avec une batterie de 16 AH MAXX⁴ ; 10.6 km avec une batterie 8AH**
- Vitesse maximum jusqu'à 6.76 km/h
- Le guidon Delta avec poignées ergonomiques enveloppantes vous permet d'utiliser le scooter d'une seule main et de reposer vos poignets.
- Les deux ports de charge peuvent être utilisés pour charger la batterie lorsqu'elle est sur le scooter ou non.
- Comprend deux ensembles de panneaux de carrosserie de couleur facilement modifiables
- Batterie lithium-ion standard 8AH compatible avec les exigences des compagnies aériennes** ou mise à niveau vers une batterie 16AH MAXX⁴
- Deux options de siège: 17" x 17" et 20" x 18"

**Conforme aux exigences des compagnies aériennes. Veuillez consulter la note au verso pour plus de détails.

Couleur



Garnet Red (matte)



Euro Grey

Accessoires*

- Attache de type clip pour canne
- Supports à cannes/béquilles
- Support à cellulaire
- Porte-verre
- Ceinture de maintien (50", 60", 70)
- Support à bonbonne d'oxygène
- Panier arrière
- Rétroviseur
- Sac de rangement double pour appui-bras
- Bacs de rangement sous le siège
- Support à marchette
- Housse contre les intempéries
- Support à béquilles canadiennes
- Chargeur USB/XLR
- Batterie lithium-ion de recharge supplémentaire de 8 Ah**
- Batterie de recharge supplémentaire au lithium-ion 16AH MAXX⁴

*Un seul accessoire arrière peut être utilisé à la fois.