

<b>Numéro de modèle</b>	Jazzy® Carbon HD
<b>Capacité de poids</b>	400 lb (182 kg)
<b>Vitesse maximale<sup>1</sup></b>	Jusqu'à 6 km/h (3,7 mph)
<b>Garde au sol<sup>3</sup></b>	1 po au niveau du moteur
<b>Rayon de braquage<sup>3</sup></b>	36,4 po
<b>Longueur totale<sup>3</sup></b>	36,81 po
<b>Largeur totale<sup>3</sup></b>	26,4 po
<b>Suspension</b>	Suspension avant et arrière complète
<b>Pneus</b>	Avant : 6,5 po    Arrière : 10,6 po
<b>Autonomie par charge<sup>1,2</sup></b>	Jusqu'à 12,4 mi (20 km) par charge
<b>Poids du produit<sup>3,5</sup></b>	32,2 lb (14,6 kg) sans batteries
<b>Siège standard<sup>3</sup></b>	Dimensions : 20 po × 20 po Plateau d'assise rigide avec coussin amovible et dossier en toile rembourrée à tension réglable.
<b>Dimensions pliées</b>	31,3 po (L) × 26,4 po (l) × 13 po (H)
<b>Puissance du moteur</b>	24 V — 250 W, moteur brushless (sans balais)
<b>Freins</b>	Régénératifs et électromécaniques
<b>Besoins de batterie</b>	Type : Boîte de batterie lithium Capacité : 20 Ah
<b>Poids de la batterie<sup>4</sup></b>	7,5 lb (3,4 kg)
<b>Chargeur de batterie</b>	2 ampères
<b>Garantie</b>	5 ans sur le cadre 1 an sur l'électronique (limitée) 1 an sur la transmission (limitée) 1 an sur la batterie

#### DISPOSITIF DE MOBILITÉ MOTORISÉ, NON CODÉ PAR LE DME PDAC

1 Les performances varient selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, l'ampérage de la batterie (Ah), la charge de la batterie, l'état de la batterie et l'état des pneus. Cette spécification peut être sujette à une variation de (+ ou -) 10 %.

2 Testé conformément aux normes ANSI/RESNA, MC Vol2, Section 4 et ISO 7176-4. Les résultats proviennent de calculs théoriques basés sur les spécifications de la batterie et les performances du système d'entraînement. Test effectué à la capacité de poids maximale.

3 En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, cette spécification peut être sujette à une variation de (+ ou -) 3 %.

4 Le poids de la batterie peut varier selon le fabricant.

5 Comprend le poids du siège standard. Le produit est en configuration de transport, avec tous les accessoires retirés

\* Les dispositifs médicaux Pride®, de classe II selon la FDA, sont conçus pour aider les personnes ayant des limitations de mobilité.

# Jazzy®

## carbon HD

Pèse seulement  
**32lb**  
Capacité de poids de  
**400lb**

# PRIDE MOBILITY®

[pridemobility.ca](http://pridemobility.ca)

Dispositif médical de  
classe II selon la FDA


Note: Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge de la batterie, l'état de la batterie et la pression des pneus. En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue, la longueur, la largeur, le rayon de braquage et la garde au sol peuvent varier de + ou - 3 %. Les sièges sur commande spéciale ou aux dimensions non standard ne seront pas pliables à plat ni ajustables en profondeur.



Se plie et se  
déplie facilement  
pour le transport



Joystick à  
déconnexion rapide  
avec écran ACL

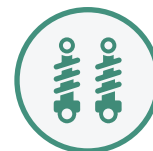

Suspension  
avant et arrière  
complète



# Jazzy<sup>®</sup> carbon HD



Appuie-tête optionnel  
avec support de conduite  
pour accompagnateur

Joystick LCD à déconnexion  
rapide avec affichage  
numérique, port USB-C  
et lumière de sol

Ceinture abdominale  
ajustable (de série)

Structure durable et  
légère en fibre de  
carbone

Suspension avant et  
arrière complète

Pèse seulement  
**32lb**  
Capacité de poids de  
**400lb**

Siège 20 po × 20 po avec  
dossier rembourré et  
pochette de rangement

Porte-gobelet  
en filet (de série)

Base compacte  
qui se plie et se  
déplie facilement  
pour le transport

Plateforme de  
repose-pieds  
ajustable en hauteur

Dispositif médical de  
classe II selon la FDA\*



FDA Class II  
Medical Device

Se plie et se déplie  
facilement pour le transport



Joystick LCD  
à déconnexion rapide avec  
affichage numérique



Suspension avant  
et arrière complète



Loquet pour verrouiller  
l'unité ouverte ou fermée

## HEAVY-DUTY. LÉGER.

Le Jazzy<sup>®</sup> Carbon HD pèse seulement 32,2 lb sans la batterie et offre une capacité de poids de 400 lb, sans compromis sur la qualité ou la performance. Il se plie rapidement et se transporte facilement grâce à sa structure durable en fibre de carbone ultralégère.

## CARACTÉRISTIQUES

- L'unité pèse 32,2 lb sans la batterie
- Capacité de poids 400 lb
- Cadre en fibre de carbone durable
- Suspension avant et arrière
- Vitesse maximale jusqu'à 3,7 mph (6 km/h)
- Dimensions pliées :  
31,3 po (L) × 26,4 po (l) × 13 po (H)
- Mécanisme de pliage facile avec boucle de sécurité
- Accoudoirs légers en fibre de carbone, relevables
- Dossier rembourré avec coussin amovible
- Plateforme de repose-pieds extra-large :  
17,25 po (L) × 5,9 po (P)
- Batterie lithium de 20 Ah, charge rapide (de série)
- Pochette de rangement à l'arrière du siège
- Joystick LCD à déconnexion rapide avec affichage numérique, port USB-C et lumière de sol
- Porte-gobelet en filet, coussin et ceinture abdominale ajustable (de série)

## OPTIONS DE COULEURS

Night Sky

Black Cherry

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Batterie lithium supplémentaire de 12 Ah, conforme aux exigences aériennes\*\*

Batterie lithium supplémentaire de 20 Ah (À venir)

Sac de transport pour batterie

Appuie-tête avec support de conduite pour accompagnateur

Trousse de voyage Jazzy<sup>®</sup> (À venir)

Coussin Simplicity  
20 po × 20 po

Repose-jambes élévateurs  
(ELR) (À venir)



Trousse de voyage en  
option (à venir)

\* Le transport de cet article à bord d'un avion est soumis aux règlements fédéraux et aux politiques des compagnies aériennes. Veuillez vérifier auprès de votre transporteur que la batterie lithium-ion est permise sur votre vol.