

QUANTUM 4FRONT² HD

4FRONT² 2 HD

illustré avec le système de siège TRU-Balance[®] 3, la manette Q-Logic 3 EX sur un support escamotable TRU-Balance[®] 3, le coussin de siège TRU-Comfort 2, le dossier TRU-Comfort 4 et l'appui-tête Stealth[®] Comfort Plus UniLink™



CAPACITÉ

(400 lb avec élévation sécuritaire de 10")

Le 4Front[®] 2 HD est la version robuste du fauteuil motorisé 4Front 2. Pour répondre aux demandes des clients bariatriques, le 4Front 2 HD est doté de moteurs à couple plus élevé et d'une suspension renforcée pour des capacités de poids plus élevées.


**FIÈREMENT
CONSTRUIT AU
CANADA**
AVEC DES PIÈCES IMPORTÉES

CONTRÔLE DE TRACTION INTELLIGENT



QUANTUM[®]

#1 POUR LES FAUTEUILS
ROULANTS MOTORISÉS



| quantumrehab.ca

Spécifications

ROUES MOTRICES	Standard: 14" anti-crevaison En option: 14" pneumatique à crampons
ROUES	Arrière: 9" anti-crevaison Avant: 4" anti-crevaison
VITESSE MAXIMUM¹	Jusqu'à 5 mph (8 km/h) Jusqu'à 2.7 mph (4.3 km/h) en position élevée
GARDE AU SOL	2.6" au pivot du moteur
RAYON DE GIRATION²	24.5"
LONGUEUR²	39.7" sans les appui-pieds
LARGEUR DE LA BASE	24.2"
DIMENSIONS DES ASSISES	
TRU-Balance® 3 HD Siège statique	Largeur: 20-32" Profondeur: 20-24"
TRU-Balance® 3 HD Bascule motorisée	Largeur: 20-32" Profondeur: 20-22"
TRU-Balance® 3 HD Bascule et siège élévateur	Largeur: 20-24" Profondeur: 20-22"
HAUTEURS SOL-SIÈGE⁹	
TRU-Balance® 3 HD Siège statique⁵	16.5-18.5"
TRU-Balance® 3 HD Bascule motorisée⁵	18.5-20.5"
TRU-Balance® 3 HD 3 Bascule et siège élévateur⁵	18.5-20.5"
FORMAT DES BATTERIES³	Group 24
POIDS DES BATTERIES⁶	Group 24: 51.5 lb
ÉLECTRONIQUE DISPONIBLE⁷	QLNES (standard) QL3e et QL3 EX (en option)
CHARGEUR DE BATTERIES	8A Externe
MOTORISATION	4-pôles, traction
CAPACITÉ⁴	Jusqu'à 450 lb Jusqu'à 400 lb avec élévation sécuritaire de 10"
POIDS DE LA BASE	140 lb

1) La vitesse varie en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de la charge de la batterie, de l'état de la batterie et de la pression des pneus.

2) Sans les appui-pieds

3) La capacité de la batterie peut changer lors de l'ajout de systèmes de positionnement motorisés.

4) La capacité de poids est dictée par le choix du siège.

5) Toutes les mesures sont à +/- 1/8" près et ont été prises avec un siège 18" x 18", des tours de siège fixes, 300 lb

de capacité de poids et des pneus anti-crevaison (ajouter 3/8" avec des pneumatiques). Les largeurs peuvent augmenter la hauteur sol-siège. Contactez le service à la clientèle client pour plus de détails. Les mesures affichées sont dans la position la plus basse; n'inclut pas le système d'élévation, sauf indication contraire.

6) Le poids des batteries peut varier de +/- 3 lb, basé sur le fabricant.

7) Toutes les unités Quantum Rehab® peuvent être commandées avec des contrôles spécialisés.

8) Appeler pour connaître la disponibilité

9) Les hauteurs sol-siège sont mesurées avec l'unité délestée. En raison du système de suspension du 4Front 2, les hauteurs sol-siège sont inférieures d'environ 0,25" lorsque l'unité est lestée.

Caractéristiques standards

- Moteurs 4 pôles
- **NOUVEAU** contrôle de traction intelligent (STC)
- Suspension (SRS) de qualité automobile supérieure
- Performances et qualité de conduite inégalées
- Stabilité accrue pour des franchissements d'obstacles en douceur
- Bras articulés (arrière) redessinés pour une durabilité et une esthétique améliorées ainsi qu'une réduction de poids
- Manette QLNES
- Augmentation de la vitesse jusqu'à 5 mph (8 km/h)
- Feux avant et arrière à DEL montés sur les ailes
- Technologie de conduite silencieuse

Options


* Voir le bon de formulaire de commande pour la liste complète des options.

- Siège élévateur motorisé avec élévation sécuritaire de 10" pour une vitesse allant jusqu'à 2.7 mph (4.3 km/h)
- **NOUVELLE** caméra de recul
- Support pour ventilateur Trilogy⁸
- Support pour ventilateur compact⁸
- Électronique Q-Logic 3 EX
- Contrôles de conduite spécialisés
- Sièges et positionnement Stealth Products[®]

Couleurs



Hydrographiques

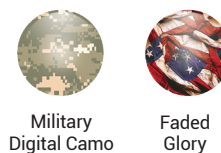

QUANTUM®

#1 POUR LES FAUTEUILS
ROULANTS MOTORISÉS

quantumrehab.ca

